




**МИКРОТОКОВЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ
КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ С ПОДОГРЕВОМ**
Массажный инструмент для ухода
за кожей

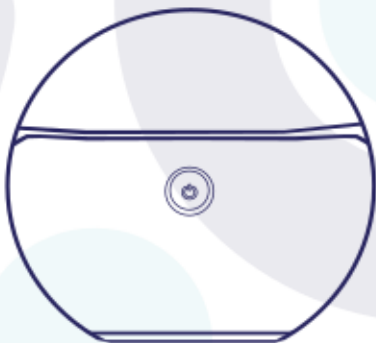

Scraping Massage Tool
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VBG | COSMETIC



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЭТОГО ПРОДУКТА!

Чтобы правильно использовать данное изделие, пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием; чтобы ознакомиться с руководством в любое время, когда оно вам понадобится, пожалуйста, храните это руководство в надежном месте.

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ:

Изображения продукта и соответствующие характеристики продукта, приведенные в данном руководстве, могут использоваться только в качестве справочных материалов. Пользователь будет использовать фактический продукт в качестве стандарта, а данные, на которые ссылаются, поступают из лаборатории компании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности перед использованием. Пожалуйста, используйте этот продукт правильно в соответствии с содержанием и рекомендациями руководства.



Связанный контент: Неправильные действия могут привести к опасной травме.



Сопутствующее содержание: Неправильная эксплуатация может привести к личной опасности или повреждению имущества.



ОПАСНОСТЬ

- Пожалуйста, используйте зарядный кабель, прилагаемый к данному изделию, или зарядный кабель, соответствующий техническим характеристикам изделия, и правильно подключите вилку зарядного устройства к бытовой розетке, чтобы избежать неисправности или возгорания, вызванного нагревом.
- Поскольку данное устройство имеет встроенную аккумуляторную батарею, держите его вдали от огня и не используйте при высокой температуре, что может привести к неисправности или возгоранию из-за перегрева.
- Если изделие необычно горячее, деформировано, повреждено или имеет неприятный запах, не используйте его во избежание поражения электрическим током и пожара.



ОСТОРОЖНО

- Этот прибор является персональным массажным аппаратом и не заменяет лекарств и медицинские устройства.
- Этот продукт не предназначен для использования людьми с физическими, сенсорными или умственными нарушениями. Лицами, не ознакомившимися с инструкцией, не имеющими опыта использования и знаний (включая детей), за исключением случаев, когда они находятся под присмотром опекуна и под его руководством используют продукт. Опекуны несут ответственность за безопасность пользователя.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

- Храните в не доступном, для детей, месте.
- Если устройство повреждено или функциональность изделия нарушена, во избежание опасности, оно должно быть отремонтировано производителем, его отделом технического обслуживания или специалистом в аналогичном отделе.
- Данное изделие не является водонепроницаемым, поэтому при его использовании, пожалуйста, не допускайте попадания воды на поверхность изделия.
- Пожалуйста, не используйте, данное устройство, во время принятия ванны.
- Выключите прибор перед его чисткой или техническим обслуживанием.
- Не размещайте данное изделие вблизи горячих и легковоспламеняющихся материалов. Он может быть подвержен неисправностям, которые могут привести к деформации, обесцвечиванию или повреждению.
- Не размещайте данное изделие вблизи горячих и легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте опасности, которые могут привести к деформации, обесцвечиванию или повреждению.
- Если вы чувствуете нарушения самочувствия или боль при использовании этого устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- Так как поверхность прибора нагревается, будьте предельно осторожны, при его использовании.
- Это изделие имеет горячую поверхность, и его следует использовать, если оно нечувствительно к нагреву.
- Людям с дерматитом, повреждениями кожи, экземой, отеками и т.д. не рекомендуется.
- Данное изделие нельзя использовать со средствами по уходу за кожей, содержащими эфирные масла, так как это может привести к повреждению аппарата.

ВСТУПЛЕНИЕ:

Обертывающий массаж

Это процедура массажа кожи, которая сочетает в себе вибрацию, интенсивный импульсный свет, тепло и микроток. Продукт основан на эргономичном сочетании различных криволинейных конструкций. Благодаря нагреву при постоянной температуре он воздействует на тело человека, а также используется для массажа, надавливания и соскабливания тела и акупунктурных точек, чтобы мышцы могли комфортно массировать и растягивать кожу и делать кожу более эластичной и влажной

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛИ



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

[Инструкции по эксплуатации панели]



Кнопка включения

- Длительное нажатие этой кнопки для запуска устройства. В состоянии включения питания каждый режим может быть изменен одним коротким нажатием, и будет гореть соответствующий индикатор режима (следующий). Доступно 7 режимов: нагрев, вибрация, микроток, нагрев + микроток.
- После включения питания вы можете выключить его, нажав и удерживая эту кнопку в течение 2 секунд в любом режиме.

[Схема функционирования]

ГОРЯЧИЙ + Красный свет

Световой индикатор красный, открывает поры, активирует клетки кожи. Способствует циркуляции крови, ярко-красному растяжению кожи.

ГОРЯЧИЙ + Вибрация + Фиолетовый свет

Световой индикатор фиолетового цвета, вибрационный массаж снимает усталость, стягивает кожу. Повышает лимфатический метаболизм.

Микроток + Вибрация + Синий свет

Световой индикатор синего цвета. Способствует сокращениям кожи, улучшает выделение кожного сала. Помогите питательному раствору проникнуть внутрь, сделает кожу гладкой и нежной.

ГОРЯЧИЙ + Микроток + Вибрация + Красный и синий свет

Световой индикатор красный и синий попеременно, стимулирует выработку коллагена, улучшает общее состояния кожи.

[Зарядка]

В первый раз, пожалуйста, полностью зарядите устройство перед его использованием. Когда батарея разряжена, индикатор нехватки питания мигает.

- Подключите устройство к зарядному кабелю и зарядному устройству и подключите его к бытовой розетке;
- Во время зарядки мигает кнопка включения;
- При полной зарядке кнопка питания больше не мигает.

[Подготовка перед использованием]

- Выберите подходящее средство для ухода за кожей, затем равномерно нанесите его на область ухода;
- Протрите устройство мягкой тканью или ватным диском;
- Используйте его после очищения кожи или после купания.

[Техника массажа]



МАССАЖ ЛИЦА

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями, перемещайте его по лицу от подбородка до корнев волос



МАССАЖ ГЛАЗ

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями, а затем с легким нажатием перемещайте устройство



МАССАЖ ПОДБОРОДКА

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями и перемещайте его снизу вверх



МАССАЖ ЛБА

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями и перемещайте снизу вверх



МАССАЖ ШЕИ

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями и перемещайте его снизу вверх



МАССАЖ ПЛЕЧ И ШЕИ

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями и перемещайте его от плеча к отметке



МАССАЖ РУК

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями, перемещайте снизу вверх



МАССАЖ НОГ

Выберите режим в соответствии с вашими потребностями, перемещайте снизу вверх

[Поддержка]

- Пожалуйста, выключите прибор.
- Защищайте прибор от попадания влаги.
- Не используйте острые или агрессивные, летучие растворители, аккуратно протрите влажной мягкой тканью или ватным диском.
- Не ополаскивайте прибор непосредственно водой, чтобы избежать повреждений, вызванных попаданием воды в машину.

Послепродажное обслуживание:

1. Данное устройство предназначено только для личного использования и не подходит для коммерческого использования.
2. Мы предлагаем гарантию на изделие сроком на один год, которая рассчитывается с даты покупки.
3. В течение гарантийного срока мыотремонтируем устройство или заменим его при наличии заводского брака.
4. Чтобы подать заявку на получение гарантии, изделие должно быть отправлено продавцу, с чеком (электронным чеком) подтверждающим факт и дату покупки.
5. Гарантия не действует на (если):
 - Повреждения, вызваны неправильным использованием, таким как: использование неправильного источника питания, подключение устройства в неподходящую розетку, использование устройства для ухода за кожей с эфирными маслами, техногенные повреждения и т.д.
 - Устройство, при правильном использовании, стареет и изнашивается, но это мало влияет на функциональность продукта.
 - Проблемы с продуктом, вызванные использованием не по назначению, неправильным обращением, непрофессиональным ремонтом или использованием аксессуаров, не принадлежащих компании.
 - Расходные материалы или дополнительные аксессуары.
 - Ущерб, причиненный форс-мажорными факторами (такими как молния, землетрясения, пожары, наводнения и т.д.).Послепродажное обслуживание не включает в себя ущерб, причиненный по вышеуказанным причинам.

[Утилизация]

Маркировка на данном изделии, упаковочном материале или аксессуаре указывает на то, что материал изготовлен из материала, пригодного для вторичной переработки. Разделите отходы на различные уровни переработки, чтобы облегчить переработку полезных материалов.



[Защита окружающей среды]

Символ на данном изделии, в руководстве по эксплуатации или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы по истечении срока его службы.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными органами власти по вопросам утилизации в соответствии с классификацией отходов.



[Спецификация]

Название продукта:

Микротоковый массажер для ухода за кожей

Рабочее напряжение: 3,7 V

Напряжение зарядки: 5В/1А

Мощность: 5 Вт

Вес нетто: 77,5 г

Комплектация: 1 аппарат, 1 USB-кабель для зарядки, 1 Руководство по эксплуатации.

Примечание: В виду последовательной политики постоянного совершенствования продукции, компания оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый клиент!

Во-первых, большое вам спасибо за то, что вы выбрали массажный инструмент MEZONICA, чтобы у нас была возможность предложить вам лучший сервис. Чтобы вы могли получить более качественное сервисное обслуживание, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и тщательно храните этот гарантийный талон.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы
Пожалуйста, своевременно свяжитесь с нами, и мы решим проблему как можно скорее!

1. Если качество товара неудовлетворительное и это приводит к невозможности нормального использования, пожалуйста, обратитесь в службу послепродажного обслуживания продавца, у которого вы купили данный продукт, чтобы предложить вам послепродажное обслуживание.

2. У нас своя служба обслуживания клиентов, связаться с нами вы можете по контактам, указанным на упаковке.

3. Пожалуйста, наберитесь терпения при заполнении этой карточки гарантийного обслуживания и отправьте ее нам вместе с продуктом, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее. Спасибо!

Настоящее имя: _____

Контактный номер: _____

Канал покупки: _____

Счет покупки: _____

Номер заказа: _____

Предпочтение (выберите):



Возврат товара



Замена товара

Адрес доставки: _____
