


Oligihome



Руководство по эксплуатации

Contents


1. Детали устройства	3
2. Комплектация и аксессуары	4
3. Технические характеристики	4
4. Информация о дисплее	5
5. Инструкция по применению	6
6. Меры предосторожности	11
7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)	15
8. Гарантийные обязательства	17

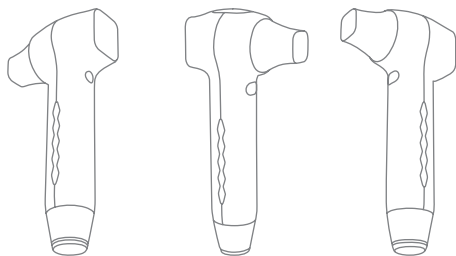

1. Детали устройства



2. Комплектация и аксессуары

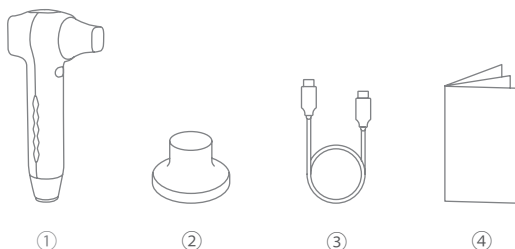

- ① Основной блок устройства
- ② Док-станция (зарядная подставка)
- ③ Кабель USB Type-C
- ④ Руководство пользователя

3. Технические характеристики

[Модель] Oligihome

[Производитель] WONMEDCO Co., Ltd.


[Страна производства] Республика Корея

[Дисплей] 1,69-дюймовый сенсорный LCD-дисплей
(IPS, 240 × 280)

[Номинальное напряжение питания] 5 В / 2 А

[Аккумулятор] Литий-ионный (Li-Ion), 3,6 В, 3200 мА·ч

4. Информация о дисплее

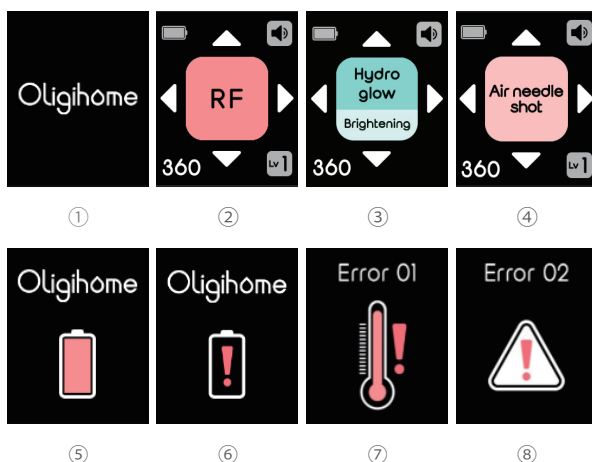

① On/Off

Mode Selection Screen

: Громкость (0~2)

: Интенсивность (1~3)

: Уровень заряда

: Оставшееся время работы

② Режим RF

③ Режим Hydro glow Mode

④ Режим Air needle shot Mode

⑤ Зарядка завершена

⑥ Низкий заряд аккумулятора
- Зарядите устройство

⑦ Предупреждение о перегреве
- Дождитесь снижения температуры устройства, затем продолжите использование.

⑧ Ошибка устройства
- Перезапустите устройство

5. Инструкция по применению

① Режим RF

Режим	Технология
RF	Радиочастотная технология (RF), красный и белый LED, инфракрасное излучение (IR)
Время процедуры	Рекомендуемая частота
6 минут	1 раз в 2 дня

- ① Очистите кожу лица и высушите ее.
- ② Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Повторное длительное нажатие выключает устройство.
- ③ На экране выбора режима проведите пальцем по экрану или коснитесь его, чтобы выбрать режим RF.
 - Установите уровень интенсивности от 1 до 3.
 - При первом использовании рекомендуется начать с 1-го уровня, постепенно увеличивая интенсивность до комфортной.
 - Во время процедуры нажмите кнопку запуска один раз, чтобы снова перейти к настройке интенсивности.
- ④ Нанесите достаточное количество CLABIANE Hydration Booster Gel или подходящего проводящего геля на кожу.
- ⑤ Нажмите кнопку запуска процедуры, затем плотно приложите рабочую поверхность устройства к коже.
 - При полном контакте с кожей устройство работает непрерывно. Если контакт прерывается, работа автоматически останавливается.

- ⑥ Медленно перемещайте устройство по коже, ощущая приятное мягкое тепло.
- Не задерживайте устройство на одном участке слишком долго.
 - Во время процедуры на коже должно постоянно находиться достаточное количество геля.
 - При недостатке геля устройство работать не будет.
 - Рекомендуемая схема обработки: по 2 минуты на каждую щеку и 2 минуты на остальные зоны лица, включая лоб. Каждые 2 минуты устройство подает звуковой сигнал. Соблюдайте рекомендуемые зоны воздействия (см. раздел 23).
- ⑦ После процедуры аккуратно вбейте остатки геля в кожу легкими похлопывающими движениями.
- Избыточное количество геля может вызвать раздражение кожи. При чувствительной или жирной коже рекомендуется удалить остатки геля или смыть их водой.

① Режим Hydro glow

Режим	Подрежим	
Hydro Glow	Осветление / Уход против морщин / Увлажнение	
Технология	Время процедуры	Рекомендуемая частота
Многочастотный ультразвук	6 минут	1–3 раза в день

- ① Очистите кожу лица и высушите ее.
- ② Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Повторное длительное нажатие выключает устройство.
- ③ На экране выбора режима проведите пальцем по экрану или коснитесь его, чтобы выбрать режим Hydro Glow.

-
- ④ В режиме Hydro Glow проведите пальцем вверх или вниз либо коснитесь экрана для выбора подрежима: Освещение/ Уход против морщин / Увлажнение.
- ⑤ Нанесите контактный гель CLABIANE Hydration Booster Gel или подходящий проводящий гель на кожу.
- ⑥ Нажмите кнопку запуска процедуры и плотно прижмите ультразвуковую рабочую поверхность к выбранной области лица.
- Во время работы белый LED-индикатор мигает.
 - ! Внимание! Не оставляйте устройство включенным без присмотра. Во время работы рабочая поверхность Hydro Glow может нагреваться. При необходимости нажмите кнопку паузы или выключите устройство.**
- ⑦ Медленно перемещайте устройство по коже.
- Не задерживайте устройство на одном участке слишком долго.
 - Если во время процедуры гель или сыворотка впитались, нанесите дополнительное количество.
 - Рекомендуется выполнять обработку по 2 минуты на каждую щеку и 2 минуты на остальные зоны лица, включая лоб.
 - Каждые 2 минуты устройство подает звуковой сигнал.
 - Соблюдайте рекомендуемые зоны воздействия (см. стр. 11).
- ⑧ После процедуры мягко похлопайте кожу, чтобы средство полностью впиталось.
- Избыточное количество геля может вызвать раздражение кожи. При чувствительной или жирной коже рекомендуется удалить остатки средства или смыть их водой.

③ Режим Air needle shot

Режим	Технология
Air needle shot	Улучшение проникновения активных ингредиентов. Светодиоды: пурпурный (Magenta), голубой (Cyan) и жёлтый (Yellow).
Время процедуры	Рекомендуемая частота
6 минут	1–3 раза в день

- ① Очистите кожу лица и высушите ее.
- ② Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Повторное длительное нажатие выключает устройство.
- ③ На экране выбора режима проведите пальцем по экрану или коснитесь его, чтобы выбрать режим Air Needle Shot.
 - Выберите уровень интенсивности от 1 до 3. При первом использовании рекомендуется начать с уровня 1 и постепенно увеличивать интенсивность до комфортного уровня.
 - Во время работы устройства нажмите кнопку подачи импульса один раз, чтобы снова получить возможность изменить интенсивность.
- ④ Один раз нажмите кнопку подачи импульса, затем аккуратно приложите рабочую поверхность устройства к чистой коже без нанесённых косметических средств.
 - Если у вас чувствительная кожа, перед процедурой нанесите тонкий слой ампулы (сыворотки) или крема.
- ⑤ Сохраняя лёгкий контакт с кожей, медленно перемещайте устройство по лицу. Не задерживайте устройство на одном участке слишком долго. Рекомендуется обрабатывать:
 - по 2 минуты каждую щеку;
 - 2 минуты оставшиеся зоны лица, включая лоб.Устройство подаёт звуковой сигнал каждые 2 минуты. Во время процедуры обращайтесь внимание на рекомендуемые зоны обработки (см. стр. 11).
- ⑥ После завершения процедуры обязательно нанесите увлажняющее средство.

Примечание: в данном режиме устройство создаёт эффект «безыгольной» микроигольчатой терапии (Air Needle Shot), улучшая проникновение косметических средств в кожу без использования настоящих игл.

- Рекомендации по использованию режимов:



Режим RF

Аккуратно проводите
устройство вверх



Режим Hydro glow

Аккуратно
прокатывайте
устройство по коже




Режим Air needle shot

Используйте, проводя
устройством от центра
к периферии


6. Меры предосторожности

6-1. Не используйте на

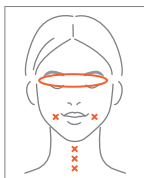

*** Не используйте устройство на верхних веках, в уголках рта и в области щитовидной железы.**

6-2. Precautions for Using RF Mode

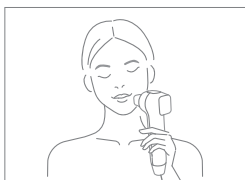

Правильное использование Неправильное использование

*** Убедитесь, что ваша рука соприкасается с сенсорной зоной.**

*** Убедитесь, что зона выхода радиочастотного (RF) сигнала плотно прижата к коже во время использования.**

*** Во время использования необходимо постоянно поддерживать достаточное количество геля.**

6-3. Меры предосторожности (для пользователей)



Внимание

Игнорирование этих обозначений и неправильное использование изделия могут привести к травмам или материальному ущербу.

- При возникновении дискомфорта или любых необычных реакций на коже во время использования немедленно прекратите применение.
- Перед использованием на участках, где проводились процедуры с применением ботокса, филлеров, нитевого лифтинга или трансплантации жировой ткани, проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы принимаете рецептурные препараты, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы недавно перенесли медицинскую процедуру или операцию, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.



Предупреждение

Игнорирование этих обозначений и неправильное использование изделия могут создать серьезный риск смерти или травмирования человека.

- Хранить в недоступном для детей в возрасте до 12 лет месте.
- Беременным женщинам перед использованием следует проконсультироваться со специалистом.
- Если состояние вашей кожи неудовлетворительное или вы проходите лечение в связи с повышенной чувствительностью, аллергией, сухостью, трещинами, тяжелой формой кистозных акне, высыпаниями, реакциями фоточувствительности (например, солнечной крапивницей) или другими серьезными заболеваниями кожи, перед использованием проконсультируйтесь с дерматологом.
- Не рекомендуется использовать средство лицам, находящимся на стационарном или амбулаторном лечении.
- Не рекомендуется использовать средство пациентам с высоким артериальным давлением, а также инфекционными или туберкулезными заболеваниями.
- При наличии отклонений в состоянии здоровья или кожных покровов, вызванных заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом или другими нарушениями обмена веществ, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы проходили курс лучевой или химиотерапии в течение последних 3 месяцев, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.



Опасно

Игнорирование этих обозначений и неправильное использование изделия могут привести к смерти или серьезной травме.

- Не используйте на участках тела, содержащих силикон, пластик, металл и т. д.
- Использование запрещено для пациентов, у которых установлены электронные медицинские устройства (имплантированные, а также закрепленные внутри или снаружи организма) для медицинских целей или поддержания жизнедеятельности.
- Использование запрещено для пациентов с параличом лицевого нерва и острыми заболеваниями сердца.
- Использование запрещено на участках с кровотечением, открытыми ранами или переломами.

6-4. Меры предосторожности при использовании изделия

[Изделие]

- Используйте специальный адаптер питания с разъемом USB Type-C (5 В пост. тока / 2 А).
- Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении USB-кабеля из зарядного порта.
- Избегайте сильных механических воздействий, таких как падение устройства или размещение на нем тяжелых предметов.

- Сильные удары могут привести к повреждению устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не размещайте устройство рядом с легковоспламеняющимися анестетиками или растворителями.
- Не размещайте устройство рядом с плитами, обогревателями и т. п.
- Избегайте эксплуатации в условиях высоких температур, повышенной влажности, воздействия прямых солнечных лучей, пыли, взвешенных частиц, солей, соединений серы и т. д. Это может привести к неисправности устройства.

[Использование]

- Не задерживайте устройство на одном участке кожи надолго; во время использования постоянно перемещайте его.
- Перед использованием устройства в режиме RF (радиочастотного воздействия) обязательно нанесите достаточное количество специального геля.
- Перед использованием снимите все металлические украшения и аксессуары, которые могут соприкоснуться с устройством.
- Не используйте устройство на области верхних век.
- Устройство предназначено для домашнего косметического ухода. Используйте его только для ухода за кожей.
- Не используйте устройство в целях, не предусмотренных данным руководством пользователя.
- Используйте устройство после умывания и вытирания лица насухо.
- Не используйте устройство и не прикасайтесь к разъему питания мокрыми руками.
- Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.
- Не используйте устройство одновременно с другими электроприборами (например, обогревателем).
- Запрещается использовать устройство в зонах с повышенным уровнем электромагнитного поля.

[Уход за изделием и его хранение]

- После использования изделия обязательно полностью удалите остатки нанесенного геля.
- Поддерживайте чистоту изделия.
- Для очистки внешней поверхности устройства используйте мягкую сухую салфетку или ткань. Не используйте средства, содержащие ацетон, а также грубые или жесткие материалы, так как они могут повредить поверхность устройства.
- После использования храните изделие на зарядной подставке.
- После зарядки отсоедините USB-кабель и храните его отдельно.
- Избегайте хранения в условиях высоких температур, повышенной влажности, воздействия прямых солнечных лучей, пыли, взвешенных частиц, солей, соединений серы и т. д.
- Соблюдайте осторожность, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия; храните его в сухом месте.

-
- Не храните устройство в замкнутом пространстве, если оно включено.
 - Регулярно проверяйте состояние устройства, его деталей и аксессуаров.
 - Если устройство долго не использовалось, перед повторным применением проверьте его исправность и безопасность.
 - Условия хранения: температура от 10 до 30 °C (50–90 °F), относительная влажность не более 80 %.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

B1. Нужно ли использовать гель CLABIANE Hydration Booster Gel при работе в режиме RF?

O1. Гель обеспечивает качественный контакт между кожей и устройством, способствуя эффективной передаче тепла. Использование устройства без геля может снизить эффективность процедуры и вызвать раздражение кожи.

B2. Обязательно ли использовать только гель CLABIANE Hydration Booster Gel?

O2. Система Oligihome обеспечивает оптимальные результаты при использовании с гелем CLABIANE Hydration Booster Gel, разработанным специально для нее. Тем не менее, можно использовать любой гель или ампульное средство с достаточным содержанием влаги.

B3. Можно ли ожидать результатов только от использования режимов RF, Hydro Glow, Air Needle Shot и LED?

O3. - Режимы RF и Hydro Glow эффективно передают тепловую и ультразвуковую энергию от эпидермиса к дерме.

Это способствует выработке коллагена, повышению упругости кожи, уменьшению морщин, лифтингу и улучшению тона кожи.

- Режим Air Needle Shot способствует глубокому проникновению активных компонентов уходовых средств в кожу.

- Сочетание LED-терапии с режимами RF и Air Needle Shot усиливает синергетический эффект. Таким образом, устройство Oligihome обеспечивает комплексный подход к базовому уходу за кожей.

B4. Возникает ли дискомфорт во время использования?

O4. В режиме «безыгольной» микроигольной терапии (air needle) микроотверстия в коже создаются с помощью электрических импульсов, что может вызывать легкое покалывание и вибрацию.

Рекомендуется начинать с 1-го уровня интенсивности и при необходимости регулировать его.

B5. Нужно ли приобретать дополнительные расходные материалы для использования устройства?

O5. Все режимы работы Oligihome рассчитаны на длительное использование без необходимости в каких-либо расходных материалах.

.

B6. Сколько времени требуется для полной зарядки устройства?

O6. - Полная зарядка после появления предупреждения о низком заряде аккумулятора занимает около 2 часов.

- Старайтесь не допускать полной разрядки аккумулятора, так как это может привести к снижению его емкости.

B7. Можно ли брать устройство с собой в самолет?

O7. В устройстве Oligihome используется аккумулятор емкостью менее 100 Вт·ч, поэтому его разрешено провозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Однако правила перевозки аккумуляторов могут различаться в зависимости от авиакомпании, поэтому перед поездкой рекомендуем уточнить информацию у вашего перевозчика.

B8. Можно ли использовать зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки?

O8. Да. Однако даже при использовании такого зарядного устройства зарядка будет осуществляться в режиме 5 В / 2 А, поэтому быстрой зарядки не произойдет.

8. Гарантийные обязательства

- 1) Пожалуйста, сохраните данное руководство, так как оно содержит важную информацию для безопасного и правильного использования Oligihome.
- 2) Данный гарантийный талон распространяется только на оригинальные изделия, приобретенные у официального продавца.
- 3) Пожалуйста, проверьте комплектность при вскрытии упаковки.
- 4) В случае повреждения или неисправности устройства обратитесь в центр обслуживания клиентов в России по телефону +7 (960) 040-2030;
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- 5) Если в процессе эксплуатации возникнет неисправность по вине производителя, гарантийное обслуживание предоставляется в течение одного года с даты покупки;
- Возврат средств за нераспечатанные изделия возможен в течение 7 дней с момента получения.
- 6) Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение в результате стихийных бедствий (например: пожара, удара молнии, землетрясения).
 - Неисправность, вызванная попаданием внутрь изделия посторонних веществ (воды, напитков и т. д.).
 - Повреждение или изменение внешнего вида под воздействием органических растворителей, таких как спирт, разбавитель или бензол.
 - Неисправность, возникшая в результате ремонта, выполненного не специалистами официального сервисного центра компании WONMEDCO CO., Ltd.
 - Неисправность, вызванная использованием неоригинальных деталей или расходных материалов.
 - Разборка изделия пользователем, приведшая к потере или повреждению компонентов.
 - Внешние дефекты или повреждения, не влияющие на основные функции изделия.

Название продукта: Oligihome

Серийный номер (S/N):

См. номер на нижней части док-станции.

Информация о продавце:

Тел.: +7 (960) 040-2030

E-mail: info@oligihome.ru

Веб-сайт: oligihome.ru

Центр обслуживания клиентов

Адрес: 209-2, 2-й этаж (корпус С), 744, Пангё-ро,
Пундан-гу, Соннам-си, Кёнгидо, Республика Корея

Тел.: +82-1660-4993

E-mail: wonmedco@wtlaser.com

Веб-сайт: wonmedco.com / clabiane.com

Oligihome



(주)원메디코

Customer Service Center: +82-1660-4993

www.wonmedco.com

www.clabiane.com

www.oligihome.ru

© WONMEDCO Co., Ltd. All rights reserved.